

EVOLUCION



ORGANO OFICIAL DE LA ASOC. DE PROTESICOS
DENTALES DE LABORATORIO ZONA SUD

Adherida a la Federación de Protésicos Dentales de la Pcia. de Buenos Aires
AÑO 6 - Nº 6 - JULIO - 2005



**ESTE AÑO INAUGURAMOS
EL LABORATORIO-ESCUELA**

ALSINA 981 - BANFIELD - PCIA. BUENOS AIRES - Tel.: 4202 -5985
www.asosud.netfirms.com asosud@latinmail.com

Aleaciones de Níquel-Cromo para prótesis ceramo-metálicas



ventura nibon / ventura titan

Aleaciones de níquel - cromo - molibdeno **sin berilio**. Valoradas por sus resultados clínicos desde 1982. Gran resistencia a la corrosión. El contenido de niobio les confiere excelente fluidez. Su oxidación controlada provoca una excelente adhesión a la porcelana.

ventura titan II

Aleación de níquel - cromo - vanadio **con berilio**. Permite obtener colados limpios y con perfecta reproducción de los márgenes más delgados. Sus superiores propiedades mecánicas la hacen ideal para el colado de puentes largos y prótesis sobre implantes.

Aleaciones de Níquel-Cromo para prótesis fijas



ventura velite

Aleación de níquel - cromo sin berilio para prótesis fija no cerámica. Millones de piezas coladas con esta aleación dan fe de sus excelentes cualidades.

ventura velite soft

Aleación de níquel - cromo sin berilio. Su baja temperatura de fusión facilita el colado y la menor dureza superficial permite al técnico lograr más rápidamente una terminación de alto brillo.

Aleaciones de Cobre-Aluminio-Níquel para prótesis fijas



ventura orcast plus Aleación de cobre - aluminio - níquel. Versión mejorada de la clásica aleación **ventura orcast**. Mayor ductilidad, excelente colabilidad. Apta para coronas y puentes de hasta cuatro piezas.

ventura orcast Aleación de cobre - aluminio - níquel para prótesis fija utilizada en Argentina y muchos otros países desde 1982 con excelentes resultados clínicos.

ventura orcast soft Aleación de cobre - aluminio - níquel con contenido de zinc. La menor temperatura de colado posibilita su fusión mediante el empleo de sopletes de gas-aire. Su mayor límite elástico permite el colado de piezas más esbeltas.

Aleaciones de Cobalto-Cromo para prótesis removibles



ventura premium La clásica aleación de cobalto - cromo - molibdeno para prótesis removibles. Sus excelentes propiedades la han convertido en favorita desde 1979.

ventura premium extra duro Aleación de cobalto - cromo - molibdeno, cuyo mayor tenor de carbono la hace indicada para la fusión por inducción sin atmósfera controlada, o para casos en que se requiera la máxima resistencia a la deformación.

ventura supercrom Aleación de cobalto - cromo - molibdeno de propiedades superiores, logradas por la alta pureza de sus componentes y un controlado proceso de fabricación. Propiedades mecánicas que exceden ampliamente los requisitos de la norma ISO 6871-1.

Revestimientos fosfatados



ventura high vest superfine - Calentamiento convencional Revestimiento fosfatado sin carbono para el colado de precisión de prótesis dentales fijas de todo tipo de aleaciones. La granulometría extra-fina produce superficies muy tersas. Su consistencia cremosa facilita la obtención de colados libres de burbujas.

ventura high vest high speed - Calentamiento rápido o convencional Revestimiento fosfatado sin carbono para todo tipo de aleaciones. Con la técnica de calentamiento rápido permite obtener colados en menos de una hora. Puede ser empleado con o sin aro de colado. Apto también para la cocción de cerámica sin metal.

ventura high vest líquido especial Permite, mediante su adecuada dilución con agua destilada, el control de la expansión de los revestimientos fosfatados. A mayor concentración, mayor expansión.



MACRODENT

Heredia 665 - (C1427CNI) Capital Federal - Tel: 4555 5500 Fax: 4552 3339

e-mail: info@macrodent.com - www.macrodent.com

Staff



REVISTA
EVOLUCION

Año 2005 - Nº 6

Organo Oficial
de la Asociación
de Protésicos Dentales
de Laboratorio
Zona Sud

P. Jurídica Nº 465 y Resol. 62/79

Dirección

Corina Rojo

Colaboradores

Pablo Ferrara
Hugo Pranteda
Valeria Bakaric
Oscar Sánchez

Diseño e Impresión

GRAFICA ANDINA
Tel./Fax: 4220-0581
Email: grafandina@sinectis.com.ar

SUMARIO

TEMA	PAG.
Editorial	3
Comisión Directiva	4
Paso a Paso	7
Técnica de Maquillaje Interno "Internal Live Stain".....	10
Actividades	18
Conociendo los implantes	21
Asesoramiento Jurídico.....	27
WI-FI en el Laboratorio Dental	29
Prótesis completa sobre barra Ackerman	33

Editorial

Aquí estamos una vez más, de pie, para continuar transitando este camino que nos hemos trazado, alimentándonos de la fuerza que nos brindan nuestros lectores, anunciantes y amigos, quienes nos manifiestan con hechos y sentimientos su aprobación y nos comprometen día a día, a tratar de mejorar y crecer para poder brindarles en cada publicación mejores propuestas y tener nuevas posibilidades de construir y contribuir al mejor y mayor logro, no solo de lo material, sino también de lo profesional y humano, tratando de beneficiar a nuestros semejantes para satisfacción y regocijo de ambos. Rescatar los valores, como la humildad, el respeto, la honestidad, la lealtad, la ética, es nuestra inquietud, ellos deben formar parte de nuestra vida personal y profesional, ellos enaltecen nuestras actitudes y mejoran nuestras relaciones, es por eso que con el mayor respeto, humildad y cariño, estamos presentes una vez más con este nuevo ejemplar, agradeciendo a todos su colaboración y apoyo. □

La Comisión Directiva

Tirada de la Revista EVOLUCION Nº 6
Julio/2005: 2500 ejemplares

Comisión Directiva

Período 1º Octubre 2004-2006


Nos es grato llevar a vuestro conocimiento que, el día 1 de Octubre de 2004, se celebró la Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación de Protésicos Dentales de Laboratorio Zona Sud, y se procedió a la renovación parcial de las autoridades, quedando la Comisión Directiva constituida de la siguiente forma:

Presidente	Sr. Horacio Roberto Nogueira
Vice-Presidente	Sr. Abel Nicolás Casal
Secretario General	Sr. Pablo Ferrara
Pro Secretario	Srta. Valeria Bakaric
Tesorero	Sr. Antonio SanJuan
Pro- Tesorero	Sr. Carlos Rodríguez
Vocales Titulares	1º Sr. Oscar Sánchez 2º Sr. Néstor Olaberry 3º Sr. Rafael Daniel Moreno 4º Sr. Hugo Pranteda 5º Sr. Fabián Colombo
Vocales Suplentes	1º Sr. Sergio Fernando Marcote 2º Sr. Mario Bañay 3º Sra. Mónica Mazzotta 4º Sr. Carlos Antonio Quinteros
<u>Comisión Revisora de Cuentas</u>	
Titulares	1º Sr. Antonio Rao 2º Sr. Antonio Vicente Bella 3º Sr. Segundo Ponce
Suplentes	1º Sra. Corina Rojo 2º Sr. Carlos Alberto Napolitano

SUBCOMISIONES

Biblioteca:	Moreno Rafael, Bañay Pedro, Rodríguez Carlos.
Revista:	Rojo Corina, Ferrara Pablo, Sanchez Oscar, Bakaric Valeria, Pranteda Hugo.
Cursos:	Casal Abel, Bañay Mario Oscar, Olaberry Nestor, Nogueira Horacio Marcote Sergio.
Sociales:	Rojo Corina, Quinteros Carlos, Napolitano Carlos, Sanjuan Antonio Colombo Fabián, Bella Antonio.

DRILLCO

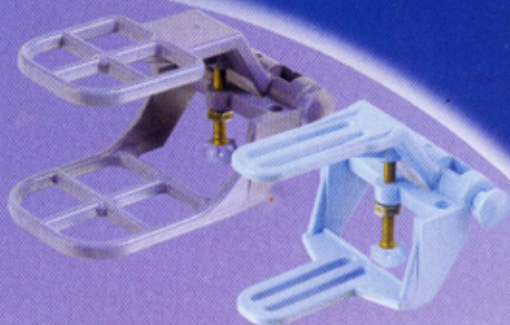

Tecnología, diseño y calidad
con mas de 40 años de prueba
en sus laboratorios dentales

www.drillco.com.ar



San Lorenzo 2987 - Remedios de Escalada
Buenos Aires - Argentina - C.P. B1826GRQ

Consultas Técnicas:
E-mail: info@drillco.com.ar
Tel:(54)11 4246-7629 / Fax: 4246-5422

LABORATORIO MODENT DENTAL®



Rafael D. Moreno



- ☛ **Prótesis Fijas**
- ☛ **Cromo-Cobalto**
- ☛ **Ortopedia**
- ☛ **Prótesis Estéticas Flexibles**



TRABAJOS PARA COLEGAS

Mas de 30 Años al Servicio de la Odontología en la zona

**I. CORREA 1832
BANFIELD**

4264-2220

Prótesis Flexibles "Estética Sabilex..."

Estéticas, Traslúcidas, Flexibles, Livianas, Adaptables, Higiénicas y Confiables



para el
Protesista
Amplie sus Ventas



Solicite
**Material Promocional de
Prótesis Flexibles**

para el
Odontólogo

Microinyectora Sabilex SF
para prótesis de nylon flexibles

- Construida para años de funcionamiento sin problemas.
- Operatoria sencilla.
- Presión de inyección consistente.
- Temperatura variable.
- Variedad de materiales, tamaños y colores, termoplásticos que ofrece Sabilex, le permite elaborar mediante técnicas de inyección, prótesis flexibles, parciales y totales, retenedores estéticos, protectores bucales y mucho más.
- Libre de monomero
- Plásticos aprobados por FDA.



**Termoformadora
SUPER FORM**



Incluye:
Video sin cargo,
Set de láminas
y Retenedor
transparente.

Tornos Colgantes



Micromotores



M3500
35.000 RPM
4 Rulemanes

Recortadora



Motor de alta velocidad



Pulidora



Leopoldo Marechal 1812 - Cap. Fed. (I414) Argentina - Tel./Fax: 54 (11) 4854-4814
e-mail: info@sabilex.com - www.sabilex.com



Por Corina Rojo

Esta reseña fue escrita con un alto contenido emotivo, porque alberga todo lo que significa la Asociación para mí.

Paso a paso, poco a poco estamos llegando a la meta que nos propusimos allá por el año 1998, cuando nos reunimos para reactivar la Asociación, acéfala desde hacía 10 años, por ese entonces alquilábamos para cada reunión un centro de jubilados, alquiler que pagábamos con el aporte de nuestros bolsillos y más tarde con la colaboración de un amigo (Walter Gandini).

En mayo de 1999, haciendo un gran esfuerzo y poniendo nuestros bienes como garantía alquilamos la sede de la calle Acha 1110, Temperley, allí funcionamos durante casi 3 años, brindándole al socio, tal vez, una no muy buena comodidad edilicia, pero sí, los primeros cursos, charlas y demostraciones.

Allí se empezó a gestar "EVOLUCION" la revista que marcó un hito en la relación no sólo con los socios sino también con los colegas de la zona y del resto del país, porque muchos de ellos nos conocieron y se conectaron con nosotros a partir de encontrarse con la revista en alguna Expo o porque algún amigo se la

acercó. También, "EVOLUCION" nos ayudó a intensificar y estrechar vínculos con las casas dentales, a quienes les estamos agradecidos por la confianza que depositaron en nuestro primer ejemplar ya que los que hicimos esta patriada no sabíamos nada de revistas, solo teníamos la intención de ponernos en contacto con nuestros pares y proveedores para que entre todos impulsáramos la Asociación y por ende nuestra profesión.

VAYA SI LO LOGRAMOS, no solo hicimos cursos, también compartimos ricos asados, bailamos en alguna fiesta de fin de año o disfrutamos un día de campo para el día del protésico. Así, paso a paso llegamos a diciembre del 2002, cuando en plena crisis, pero con una buena administración de los ingresos y el aporte de algunos miembros de la C.D. logramos comprar nuestra sede.

Era nuestra, (PERO ERA ¡TAN FEA!), dos galpones sucios y sin forma de nada, y para colmo sin un peso para intentar hacer alguna

reforma, bueno, empezamos a sugerir ideas, a hacer planes, a soñar, nos parecía mentira, por un lado, tener una propiedad, por el otro, estábamos aterrados pensando ¿QUÉ Y CÓMO? hacer para que "ESO" se asemejara a lo que nosotros soñábamos.

Con discusiones, ideas, miedos pero fundamentalmente respeto por las ideas de cada uno, y amor, mucho amor por lo que hacemos, empezamos a remodelar nuestros "GALPONES". Así hicimos los baños, el techo de la planta superior, pintamos y en junio del 2003 presentamos en sociedad nuestra nueva casa.

A partir de allí se realizaron algunos cursos, los que nos permitió la limitación que significaba estar en obras. Por esas incomodidades también queremos agradecer la paciencia de los dictantes y asistentes que alguna vez, habrán tenido que saltar escombros o se habrán ido con la ropa sucia de polvo.

Promediando el 2004 estaba terminada la oficina, y se resolvió obviamente, después de discusiones, ideas y propuestas, echarle mano a la realización del laboratorio, con el anhelo de poder comenzar los cursos del 2005 en él, y una vez más podemos decir que nuestro sueño se hizo realidad, la Asociación de Zona Sud cuenta con un laboratorio- escuela modelo, que ha sido presentado en sociedad el 29 de abril y queda a disposición de socios y colegas que quieran participar de nuestros cursos. El día de la inauguración, contamos con la



presencia de muchos amigos de casas dentales, colegas de las Asociaciones de Buenos Aires y Zona Oeste y algunos de nuestros socios, no todos los que nos hubiese gustado ver.

Pero aún no hemos terminado, faltan la cocina, el depósito, el frente, la recepción, en fin menos que al principio lo importante es que las ganas son las mismas o aún mayores que al principio, les podemos asegurar que es una satisfacción inmensa sentirse parte ejecutora de esta obra, es por eso, que una vez más, como ya lo hemos hecho antes, los invitamos a acercarse, a participar, cada uno del lugar en que se sienta cómodo, ya que sin la presencia y participación de ustedes todo esto no tiene demasiado sentido.

Debemos tener en cuenta que la Asociación nos brinda un espacio para crecer profesionalmente, nos proporciona charlas, cursos, demostraciones, nos pone en contacto con colegas que saben más, igual o menos que cada uno de nosotros, eso sirve de mucho porque todos aprendemos de todos, y además uniéndonos podríamos lograr objetivos que jamás obtendríamos en forma individual, si cada uno crece, crece nuestra capacidad para defender los derechos y hacer de esta profesión algo digno, si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Nuestra casa tiene las puertas abiertas.□

Los esperamos.





OLYMPIC DENTAL



Full Ceram 200

- 150 programas.
- 12 parámetros por programa.
- Identificación de los programas por nombre y número.
- Programación completamente modificable, incluso durante la cocción.
- Mufla de cristal de cuarzo.
- Modo noche.

MICROFLEX

Resina para prótesis flexible



Prima Rock



Yesos y revestimientos

Fórmula 1

Ceramco³

LLEVA SU TÉCNICA A UN NUEVO NIVEL

Nuevo
26 colores 3D master*
MÁS LOS TRADICIONALES
16 COLORES CLASSIC.



Vera Bond

La más alta calidad
en aleaciones para porcelana



Otero 185 (1427) Buenos Aires - Argentina - Tel (011) 4855-2740 - Fax (011) 4855-2721
ventas@olympicdental.com www.olympicdental.com

olympicdental.com


Procedimiento

1. Primera aplicación de opaquer y cocción.
2. Segunda capa de opaquer y cocción.
3. Modelar una estructura en forma de dedo en la parte incisal con ayuda de un disco.
4. Limpieza por ultrasonidos o por vaporización.
5. Aplicación y cocción de la coloración interna horizontal (Ejemplo 1. Pequeñas manchas de color blanco en dirección horizontal sobre las regiones gingivales y proximales).
6. Aplicación y cocción de la segunda coloración interna vertical. (Ejemplo 2: Línea coloreada de control en la dirección vertical).
7. Aplicación del translúcido y cocción.
8. Corrección morfológica.
9. Limpieza por ultrasonidos o por vaporizador.
10. Glaseado.


Precauciones

1. Existe un riesgo de ennegrecimiento si se emplea un líquido de otro fabricante. Por esto es fundamental, el empleo exclusivo del líquido de la gama *Noritake* para el color *Internal Live Stain*.
2. El líquido para color *Internal Live Stain* de *Noritake* está recomendado para el uso exclusivo de la coloración interna. Si se necesita obtener una coloración externa adicional, se aconseja la utilización de los maquillajes de superficie *Noritake*.
3. Es necesario evitar dejar demasiado tiempo la mezcla preparada de color y líquido colorante sobre la tabla de mezcla. Evitar realizar demasiados añadidos sucesivos, lo que podría resultar en una degeneración del producto y la consecuente aparición de burbujas.
4. Para obtener el resultado deseado, es esencial dividir el proceso en dos tiempos de cocción diferentes.
5. El líquido del maquillaje interno puede disolver algunos materiales plásticos.


Técnica de caracterización para personas jóvenes

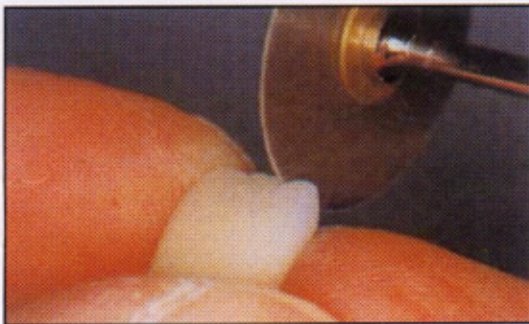


Trabajar la dentina y el esmalte en la forma usual. Después de la cocción, es necesario, preformar la estructura interna con un disco o una punta,

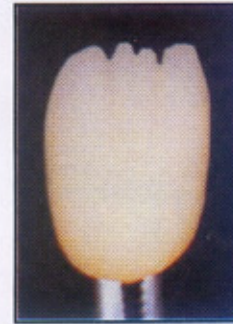

La forma interna está terminada y la corona limpia. Aplicación del maquillaje interno según el gráfico de coloración.

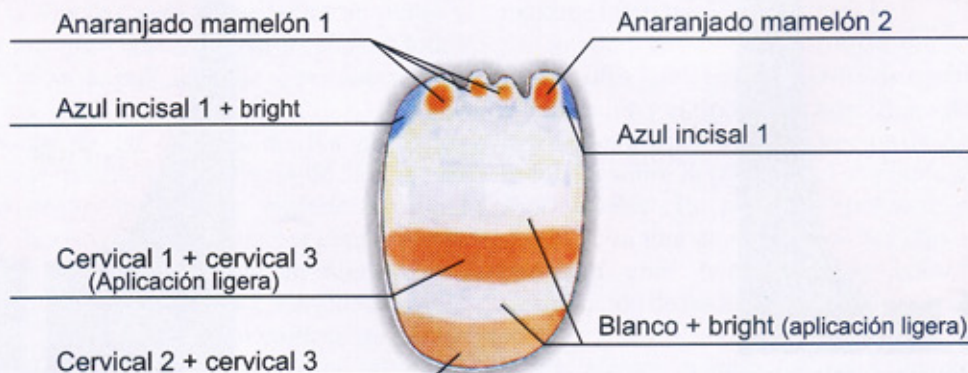

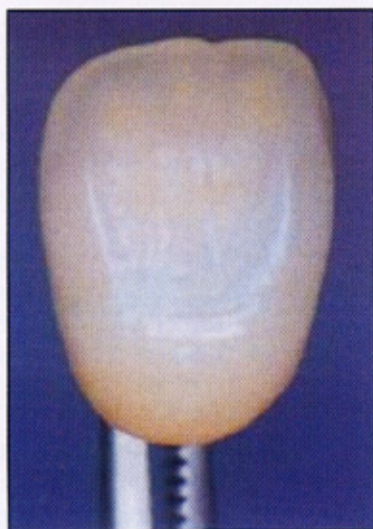



- Caso Clínico

Aplicación de la corona en la cavidad oral.


Glaseado y pulido, ejemplo terminado para caracterización de un diente joven.

Técnica de caracterización para personas de mediana edad

EJEMPLO DE COLORACION DE UN DIENTE DE UNA PERSONA DE MEDIANA EDAD.

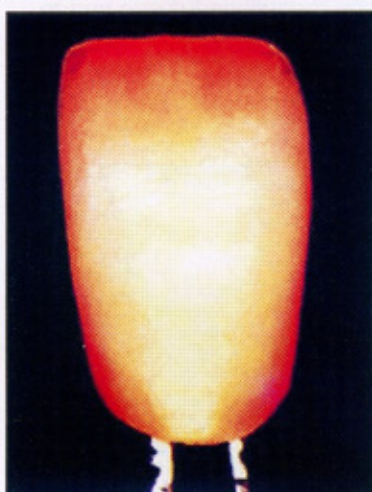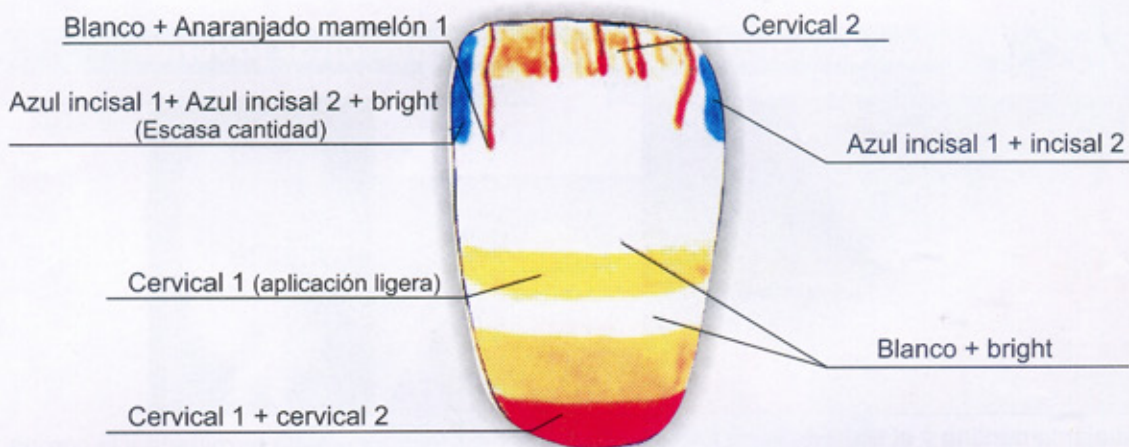


Aplicación del maquillaje interno según el gráfico de coloración.

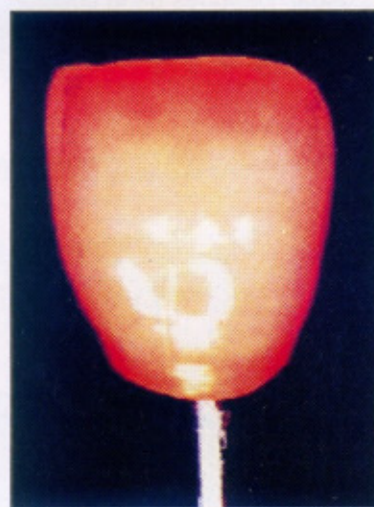

Pieza ya pulida y acabada

Productos

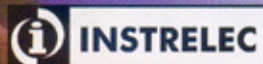

*En Buenos Aires un centro de atención
personalizada y asesoramiento
para el Protésista Dental*

*Venta de los productos INSTRELEC para
laboratorio Dental*

*Servicio Técnico y
Mantenimiento de equipos.*

**Av. Congreso 3325 - 6 Piso - Of. B
C1430AZA Buenos Aires
TeleFAX: (011) 4543 4702**

Dentalia

equipos e insumos para laboratorio dental

Central:

Lima 1180

X5004FQN Córdoba

TeleFAX: (0351) 451 8939

**e-mail: ventas@dentaliacba.com.ar
www.dentaliacba.com.ar**

- Caso Clínico



Tras la cocción, posicionar sobre el modelo para verificar la localización y la intensidad de la caracterización personalizada. La segunda aplicación del color interno está terminada.




Se puede finalizar utilizando maquillajes de superficie.




Aspecto después de la colocación del trabajo terminado.

Técnica de caracterización para personas ancianas

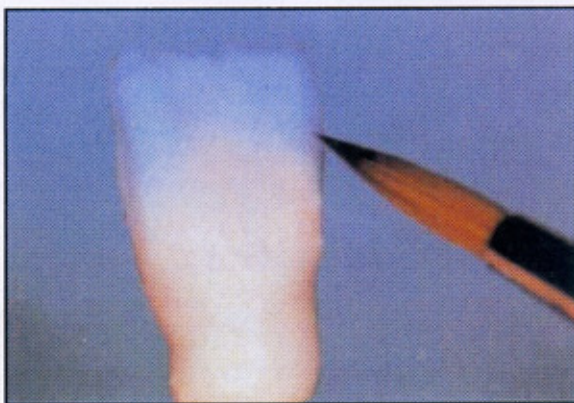

Modelar la dentina y el esmalte en la forma y tamaño apropiados según los dientes adyacentes y antagonistas.


Tras la cocción, alisar ligeramente la superficie con la ayuda de una punta de una punta o arenar con óxido de aluminio.

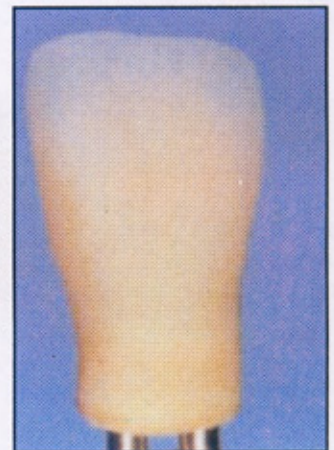




Limpiar y aplicar las caracterizaciones en sentido horizontal. Cocer y aplicar las de sentido vertical.


La cocción de la coloración Internal Live Stain necesita un tiempo de secado de 3 min a la entrada de la mufla, después, cocer de 700 °C hasta 830 °C con una velocidad de aumento de la temperatura de 554°C/min, en atmósfera. Tras este proceso el aspecto debe ser mate.

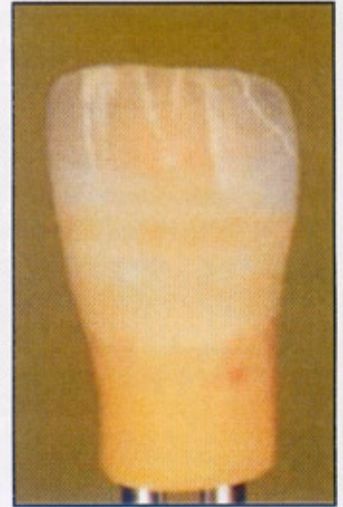

EJEMPLO DE COLORACION DE UN DIENTE VIEJO

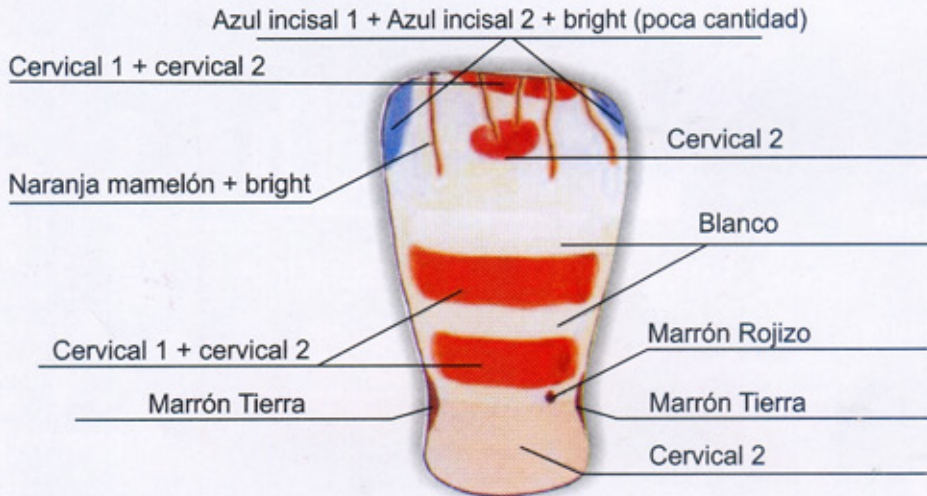

Existen diferentes masas de cerámica translúcidas y opalescentes de forma que utilizándolas en las zonas incisales, labiales y proximales obtenemos los efectos naturales deseados.

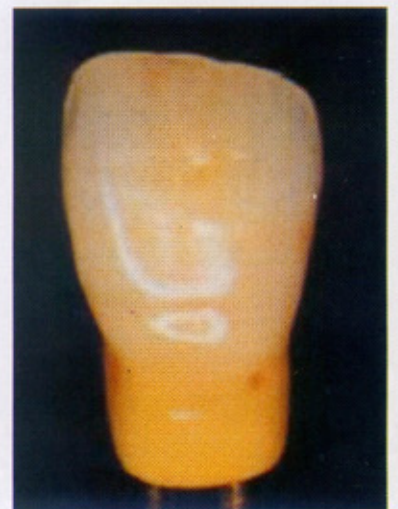

Durante la corrección morfológica la caracterización cromática de base, aparece interiormente. Se puede emplear maquillajes de superficie para finalizar la caracterización personalizada. Posteriormente se glasea y pule.

Vaicel

Acrílico autocurable para reproducciones, rebasados y colado de placas de ortodoncia.

Celcind

Acrílico autocurable de bajo costo para cubetas individuales.

Plaxden

Placas base dentales. Plásticas, no poseen "memoria".

Lumilac

Laca abrillantadora. Sellador de superficies acrílicas

Opalac

Laca opacadora de metales. Enmascara el fondo metálico en las carillas acrílicas.

Vetas y Colorantes

Para caracterizar acrílicos

Vaicel RB

Para rebasados definitivos en boca no irritante. No exotérmico.

Seccal

Removedor de yeso. Elimina completamente todo resto de yeso de los intersticios del acrílico.

Ceras Dentales

Tipos: Rosada para modelar (verano e invierno), Amarilla para mordidas, Plástica (utility).

Vaicron

Acrílico termocurable para base de dentaduras, de fórmula clásica y efectiva.

Vaicel Corona

Resina acrílica autocurable especialmente desarrollada para la realización de coronas y puentes provisionales.

Perlas de Retención

Perlas de metacrilato. En tres tamaños para facilitar la tarea del protesista.

Filmogen

Separadores de yeso y acrílico de dos tipos: Rosado (base alginato) y Marrón.



Materiales Dentales Confiables

Choele Choel 354 - B1822DPH Valentín Alsina
Pcia. de Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (54-11) 4208-3740 // 4218-3518
Fax: (54-11) 4208-9707 - E-mail: vaicril@rcc.com.ar

VITA

Calidad y prestigio
en cerámicas al mejor precio.

Los colores VITA constituyen el estándar mundial para la determinación y reproducción de los colores dentales.

"Estamos orgullosos de que finalmente nuestros usuarios puedan determinar y reproducir con seguridad todos los colores de dientes naturales humanos con el sistema Vita 3D Master."

Actualmente, los colores dentales VITA sirven como referencia mundial para la determinación de los colores dentales.



VITA SYSTEM 3D-MASTER
ORIGEN ALEMANIA

Cerámicas
VMK 95
Omega 900
VM 7

3D-Master

In-Ceram



M. T. de Alvear 2076 piso 2° "A" C1122AAE Bs As
Tel: 011-4821-2111 Fax: 011-4821-3229
lab@grimbergdentales.com

Grimberg Córdoba
Av. Vélez Sarsfield 308 X5000JUQ Córdoba
Tel: 0351-422-2181 Fax: 0351-422-3851
cordoba@grimbergdentales.com

www.grimbergdentales.com



Indef....30 años innovando en hornos eléctricos

Indef
HORNO ELÉCTRICOS S.A.

Hornos eléctricos para el precalentamiento de aros

Distribuidores en todo el país. Consulte nuestra página



ventajas

Placas sustituibles
Bajo consumo eléctrico
Con programadores
Un año de garantía.

aplicaciones

todos los modelos son para
Prótesis fija
Cromo cobalto

Línea Metal

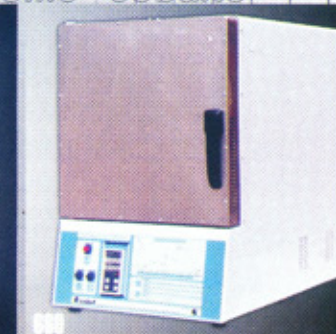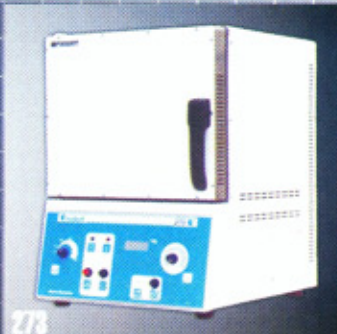

133

273

332

500

Hornos Eléctricos S.A. - Calderón de la Barca 662 (X5001AYN) Córdoba - Argentina Tel:0351-4717255 e-mail: informes@indef.com.ar

www.indef.com.ar

Actividades

Día del Protésico

El 20 de Marzo a pesar de la lluvia, nos reunimos en nuestro camping de los Barraqueros, con las Asociaciones de Zona Oeste y de La Plata para festejar nuestro día, asado de por medio, compartimos una jornada colmada de buena onda, juegos y sorteos de obsequios, que como siempre tan gentilmente nos hacen llegar nuestros amigos de algunas casas dentales. Estos eventos nos llenan de placer, porque a través de ellos sentimos que la tarea que realizamos a lo largo del año no es en vano y que la convocatoria no se ve opacada ni aún por las inclemencias del tiempo. GRACIAS por su presencia. □



¡¡ SEÑOR SOCIO !!

Les informamos que los nuevos días de atención de la secretaría son: Martes de 16 a 20 hs. y Viernes de 14 a 18 hs. y de 19,30 a 22 hs. En este horario se reúne la Comisión directiva, los invitamos a acercarse y participar de dichas reuniones.

Marcela es nuestra nueva secretaria, a ella le damos la bienvenida y queremos agradecer a Ornela por el tiempo que compartió con nosotros y por toda la

cooperación que nos brindó. Le deseamos mucha suerte en su nuevo trabajo.

Recuerde si aún no nos ha enviado su correo electrónico, le rogamos nos lo hagan llegar, ya que este medio de comunicación nos agiliza mucho la tarea para estar en contacto con Uds. Nuestro e-mail: asosud@latinmail.com □

Cursos

Este año se realizarán una serie de cursos y charlas entre los cuales podemos citar:

- **Ortodoncia Fija:** Dictado por el Sr. Santiago Lucarelli (se dictó en los meses de mayo y junio)
- **Tratamiento de impresiones y obtención de modelos de trabajo:** Dictado por el Sr Miguel Formigo. Mes de Junio
- **Prótesis Fija:** Encerado, colado y frentes estéticos. Dictado por la Sra. Inés Violi. Mes de Agosto.
- **Porcelana sobre metal:** Dictado por los Sres. Carlos Rodríguez y Néstor Olaberry. Mes de Setiembre.
- **Estratificación Compuesta:** Dictado por el Sr. Mario Bañay. Mes de Setiembre.
- **Prótesis Flexibles:** Dictado por el Sr. Horacio Nogueira. (Fecha a confirmar)
- **Prótesis Completa:** Dictado por el Sr. Abel Casal. (Fecha a confirmar)
- **Microfesado:** Dictado por el Sr. Eduardo Delamano (Fecha a confirmar)
- **Función y estética en la porcelana libre de metal:** Dictado por el Sr. Ricardo Castor. (Fecha a confirmar).▫



Camping

Seguimos teniendo la oportunidad de tomarnos un día de descanso y disfrutar de las instalaciones del camping de los Barraqueros en la localidad de Ranelagh.▫

Inauguración

El día 29 de Abril inauguramos el Laboratorio-Escuela en nuestra sede, el

mismo nos llena de orgullo ya que es el producto de un profundo sacrificio de algunos de los miembros de la C.D. que hemos trabajado denodadamente, pero que hoy estamos felices por la repercusión que tuvo el mismo entre nuestros amigos y socios, con quienes compartimos un brindis. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron ese día.▫

Eventos Sociales

·El día 4 de Junio se realizó en nuestra sede una Lotería familiar, contamos con una nutrida concurrencia de socios, familiares y amigos, pasamos una tarde muy amena, compartiendo un grato momento que esperamos se vuelva a repetir.

·No solo queremos convocar a nuestros socios para cursos, charlas o demostraciones, nuestra intención es compartir también un día de pesca con aquellos amantes de este interesante deporte, para eso queremos saber cuantos interesados hay para tal efecto, por eso los invitamos a ponerse en contacto con el **Sr. Fabián Colombo al teléfono: 4238-0163.**□



Cobertura Médica

Recordamos a nuestros socios que tienen la posibilidad de utilizar los excelentes servicios que les brinda CONSOLIDAR SALUD, esta prepaga cuenta con planes acorde a cada necesidad y les ofrece interesantes opciones y descuentos a nuestros asociados. Además se ha incorporado un nuevo beneficio para los **Monotributistas**, pudiendo aprovechar su aporte y el del grupo familiar adherido, utilizándolo para el pago parcial de la cuota mensual. Otro beneficio es el de estar exento del 10,5% del Iva si se contrata la prepaga a través de la Asociación. Estas dos ventajas son sumamente importantes y permiten contar con un muy buen servicio médico a un precio muy razonable.

Para mayor información contactarse con la **Sra. Elisa Palladino a los teléfonos:**

4326-3201 ó 4631-0475.□

Area Protegida

A partir del mes de mayo contamos con EMME (servicios de emergencias) para proteger a todos los socios que acuden a la asociación.□

Estacionamiento

Tenga en cuenta que cuando acude a nuestra sede tiene la posibilidad de estacionar con total tranquilidad su vehículo, en el garage de Alsina 770, abonando con descuento, si hace sellar en secretaría su ticket.□

Publicidad Estática

Les comunicamos a las casas dentales que aun no han colocado su publicidad estática en nuestro salón de conferencias y deseen hacerlo, pueden ponerse en contacto al 4202-5985, 4247-8888 ó 4247-5279.□

Conociendo los Implantes

KOMENDAT MARTÍN
Técnico Dental
www.dentalartec.com.ar

Cuántos laboratorios hoy en día cuentan con el instrumental, equipamiento necesario y capacitación real para realizar prótesis sobre implantes; nuestra profesión día a día nos lleva a realizar un continuo esfuerzo por mantener actualizados nuestros conocimientos.

En el año 1982 los implantes óseointegrados aplicados a la odontología se hicieron populares, después de severas investigaciones científicas desde el año 1952. Los especialistas en protodoncia, periodoncia y cirugía oral, además de realizar prácticas avanzadas desde 1982 donde se los empezó a utilizar únicamente en corona y puentes fijos tradicionales, pero las perspectivas apuntaban también a los pacientes edéntulos. (Prótesis total) como tratamiento habitual. Este mayor uso ha originado cambios muy importantes, por lo que los técnicos dentales necesitan ser mucho más creativos.

La elaboración de prótesis soportadas por implantes requiere un conocimiento especializado así como la colaboración entre técnicos, odontólogos y pacientes.

Creo que en primer lugar tendríamos que saber "qué es un implante": pilar de estructuras metálicas (titanio u oro) que consta de tres partes, hoy en día. Pilar de fijación en hueso (oseointegración) pilar de emergencia de anclaje y tornillo de fijación **Fig. I**



Asimismo debemos saber qué quiere decir oseointegración; es la unión directa estructural y funcional de hueso vivo ordenado, con las superficies de un implante que soporta una carga, desde ya que dicha carga estará estudiada clínicamente por el



Fig. II Sobredentaduras fijadas y ancladas en hueso mediante barras y caballares Lábilis.

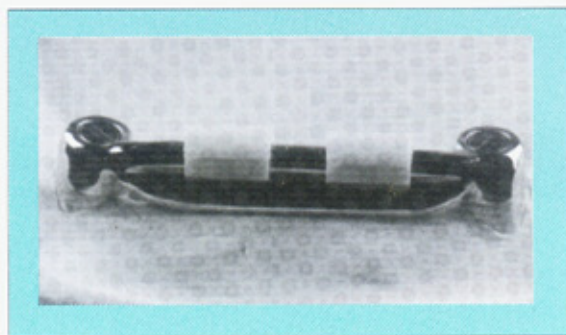


Fig. III Implantes óseointegrados para atache a bola

odontólogo cirujano al planificar en la colocación de los implantes y por el técnico dental en la construcción de la futura prótesis funcional con su respectivo diseño y planeamiento.

A medida que aumenta la edad media de la población y la esperanza de vida, es seguro que cada vez serán más los pacientes para los que la

dentadura postiza suponga un problema. Los pacientes que son portadores de dentaduras postizas durante muchos años, terminan padeciendo una gran pérdida de hueso en la cresta residual, por lo que acaban perdiendo dimensión vertical, estabilidad y retención de la prótesis.

La experiencia nos ha demostrado que para la correcta rehabilitación de pacientes con prótesis tejido-integrada, el trabajo en equipo es muy efectivo y práctico. El técnico dental debe ser un eslabón muy experimentado e informado de este equipo, ya que no solo es el responsable de la elaboración de los módulos de diagnóstico, técnicas quirúrgicas y la prótesis final, sino que a menudo y con frecuencia se le pide que aporte datos técnicos sobre el plan inicial del tratamiento.

A continuación, detalle de distintos tipos de aplicaciones en sobredentaduras totales. □

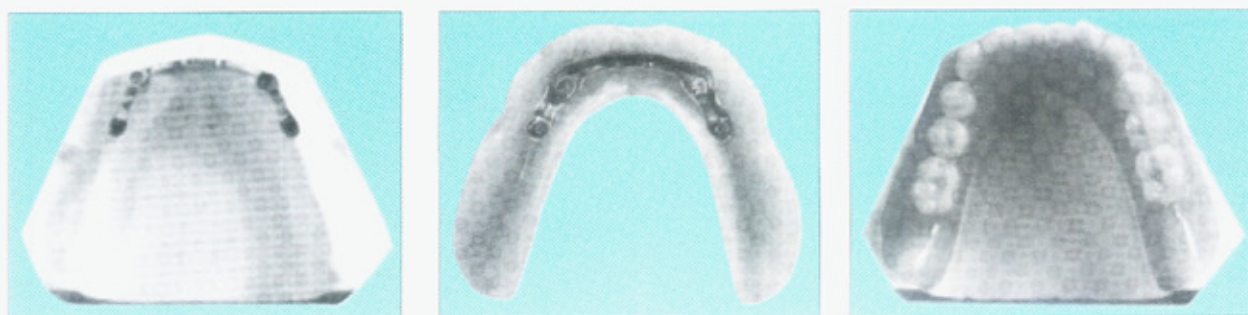


Fig. IV Sobredentadura fijadas con atache C Revax y barras tangenciales, paralelizadas y fresadas

MGR



- Prótesis Fija
- Flexibles
- Cromo
- Ortopedia
- Ortodoncia

**TRABAJOS
PARA
COLEGAS**

LABORATORIO AUTORIZADO

Deflex®


Tel.: 4258-4493

Email.: maruracano@hotmail.com

Deflex®

La prótesis de contacto

"Dentaduras estéticas flexibles"

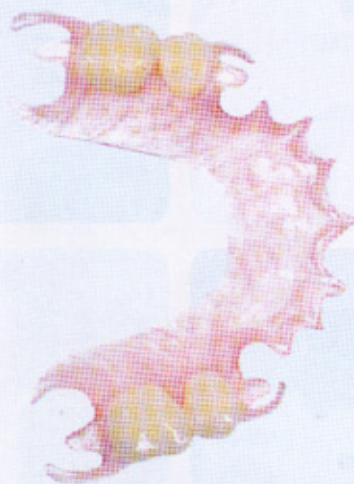

- estética
- funcional
- irrompible
- higiénica
- liviana
- confortable
- hipoalergénica




**EXIJA GARANTÍA
DE CALIDAD DEFLEX**
(sello autoadhesivo)

● Venta Sistema de Inyección

- Servicio de inyección a todo el país

Además contamos con:

- cursos de capacitación
- asesoramiento técnico
- servicio post venta

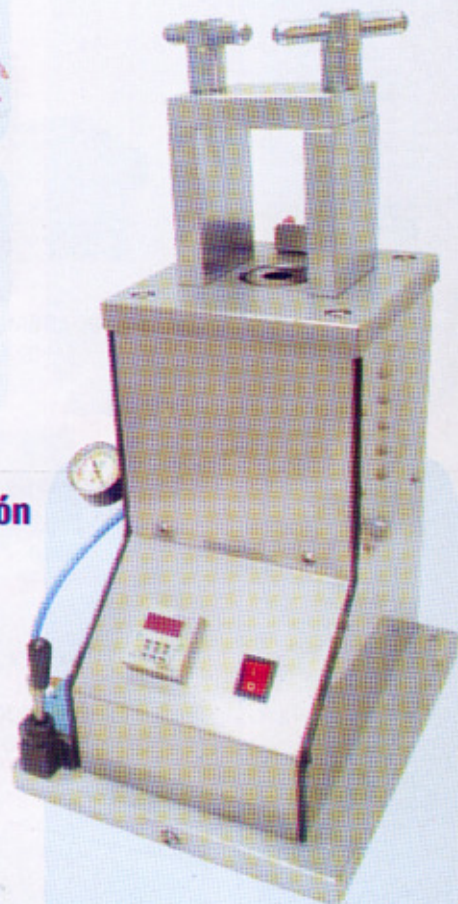

Ayacucho 1053 3º Piso. Oficina "A" - Cap. Fed. - Bs. As. / Tel.: (011) 4812-9638
www.deflex.com.ar / e-mail: info@deflex.com.ar

En equipamiento para calidad



HORNO AUTODENT S-2



HORNO H-21 DIGITAL



PRENSA MECÁNICA
PARA 3 MUFLAS



HORNO H 23-P 30



HORNO H 35-P 30



TERMOFORMADORA
VP-301



PULIDORA
PULY-307



GENERADOR
DE VAPOR EV 1



RECORTADORA
DE MODELOS



CÁMARA DE PRESIÓN CP-01



CENTRÍFUGA
MANUAL

www.tecnodent.com.ar



laboratorios: eficiencia y seguridad.



ARENADORA AC-100



ARENADORA A-1



ARENADORA AL-200



POLIMERIZADORA Poli-Mat 3



POLIMERIZADORA Poli-Mat 2



VIBRADORES VIBRA-28
y VIBRA-20

Armados por Tecnodent
con componentes italianos



MICROMOTOR MI400



MICROMOTOR MI330



CALENTADOR DE CERA
DE TRES DIVISIONES

tecnodents.a.

EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS

Corregidores 1137 / (B1706FZC) Haedo - Pcia. de Buenos Aires - Argentina




Tel./Fax: +54 11 4627-4766 y +54 11 4627-4767

www.tecnodent.com.ar

e-mail: info@tecnodent.com.ar



EGEO M.R. S.R.L.

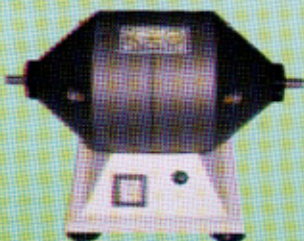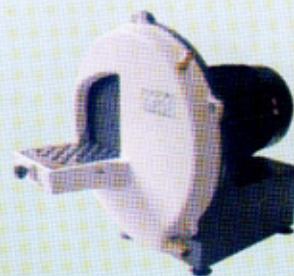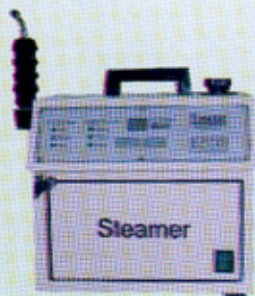

Warnes 1050 - (1834) - Temperley - Buenos Aires - Argentina

Tel/Fax: (54-11) 4244-0471 / 4292-5304

E-mail: egeoegeo@ciudad.com.ar / Web site: www.egeodental.com.ar

Aseesoramiento Jurídico

Dr. Hector Yemmi
Abogado

Sres. Asociación Protesistas Dentales de la Zona Sur.

De mi consideración:

Es motivo de la presente informarles que en mi carácter de abogado estoy llevando adelante varios juicios laborales y Dentales.

Que atento a la relación entablada con los profesionales odontólogos es recurrente tres tipos de problemáticas, una de ellas es la demanda laboral realizada por los colaboradores de los protésicos dentales en los laboratorios, otra es la relación de los protésicos con las empresas encargadas del gerenciamiento de distintos consultorios y como último, y gran conflicto, es el desconocimiento de lo adeudado por los profesionales odontólogos por los trabajos entregados por los señores protésicos.

Atento a lo expresado es importante:

1) Realizar contratos de locación de servicios con el personal temporario que ofrece servicios a los laboratorios.

2) Cualquier entrega de trabajo a los

odontólogos debe estar debidamente certificada, como asimismo el monto en pesos del monto del trabajo entregado (la firma del profesional en la copia de la factura, etc), como también dejar especificado en la orden de trabajo el día de entrega y/o cualquier acotación que pueda servir como prueba de la deuda.

3) En el caso de establecer una relación comercial con una "gerenciadora" es importante aclarar que la misma en caso de conflicto argumentará que entre el Técnico de Laboratorio y la "gerenciadora" no existe relación laboral, sino solo una locación de servicios y/o una sociedad de hecho, atento a esto se debe acordar una relación por medio de un contrato o solicitarle al empleador que cumpla con las normativas legales vigente que establece la Ley de Contrato de Trabajo, como asimismo la AFIP.

Por cualquier consulta comunicarse las 24 hs. Al 15-5816-7550. □

COMPRESORES DE AIRE

Ventas - Permutas - Reparaciones - Service



- *Nuevos*
- *Reacondicionados*
- *Odontológicos*
- *Aerográficos*



REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS

Av. Eva Perón 1109 (ex-Pasco) - Temperley
www.micompresor.com.ar
info@micompresor.com.ar


4244-2898



Laboratorio Dental

T.D. Claudio Mengoni


► Cromo Cobalto

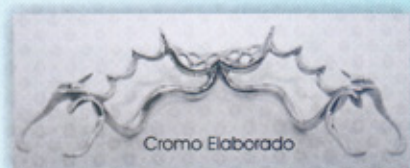

► Cerámica



► Implantes

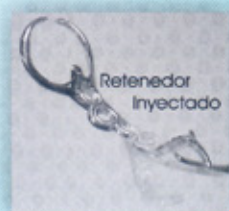

► Attachment

REALIZAMOS TRABAJOS PARA ODONTÓLOGOS Y PROTESISTAS DE TODO EL PAÍS

Uruguay 417 Dpto. 3° Avellaneda (1870) Bs. As.- Tel. Fax (011) 4208-5622

Laboratoriodentalcm@ciudad.com.ar

Transflex®

La Prótesis Flexible
de última generación



ESTETICA
LIVIANA
FLEXIBLE
TRASLUCIDA

Más resistente por la incorporación
de fibra de carbono.

Certificaciones FDA y EUROPEAN UNION

Venta de insumos para laboratorios
Servicio de inyección de muflas


Tel. (011) 4202-7895 / 15-5057-7040
transflex@ciudad.com.ar

MK1

Attaches

the **easy** solution

Nuevamente en Argentina

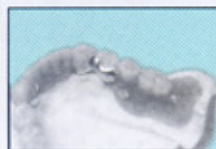

Representante exclusivo
en el país
CONTACTENOS
4964-4049 / 4962-5300
mk1argentina@hotmail.com

WI-FI en el Laboratorio Dental

Por Lic. de Sistemas Raúl Fidel Castro

Denture System

Hace unos años era imposible recomendar a un Técnico Dental [TD] que implemente Internet en su Laboratorio [LD], porque lo usaban en su casa la familia (esposa e hijos) para otros menesteres, o simplemente instalar una Red de PC utilizando el Sistema DENTUREWIN porque había que encarar una serie de engorrosos arreglos estructurales y estéticos, en el LD para poder cablear el mismo e intercomunicar las PC.

Y el cable dejó paso a la era inalámbrica

Cientos de dispositivos electrónicos forman parte de la vida cotidiana del TD, lo que nos plantea la creciente necesidad de estar "conectados todo el tiempo" a Internet o en su defecto a otros dispositivos de información.

La tecnología Wi-Fi llegó para dar una solución impensada a todas estas necesidades, permitiendo acceder a la "movilidad" dentro del LD. Con una Notebook o una PDA unidas sólo a un cable de alimentación de corriente, y con una tarjeta PCMCIA 3Com Wi-Fi (o una Wi-Fi USB o PCI para el caso de las PC).

El TD ahora puede desplazarse por varios puestos de trabajo de su LD y por ejemplo mandar a imprimir a una Impresora Remota con similares características o conectadas a una PC de la RED, revisar su e-mail desde su casa, laboratorio ó en el bar de la esquina de su laboratorio, si están dentro de los 45 / 90 m de distancia aproximado.

Algunos requerimientos

- ✍ Sistema Operativo Ideal: Windows XP con el Service Pack 2 instalado.
- ✍ Tarjetas Wi-Fi USB o PCI para PC de escritorio
- ✍ Router inalámbrico Wireless
- ✍ Tarjetas PCMCIA 3Com Wi-Fi para Notebook

Diccionario de Términos básico

Wi - Fi	("Fidelidad inalámbrica") Wireless Fidelity	término que engloba a un conjunto de estándares para las redes sin cables basados en el protocolo IEEE 802.11 actualizado al IEEE 802.11b
Hotspot	("zona caliente")	se dice del área en donde hay señal Wi-Fi
Hotspot	Públicos	En Bares, Restaurantes, Aeropuertos, Hoteles, Estaciones de Servicio, Zonas Turísticas, etc.
Hotspot	Pagos	Plantea la necesidad de un Nombre de Usuario y de una Clave (ISP-Ciudad Internet)
Access Point	Punto de Acceso	Dispositivo básico y económico que provee sólo conectividad inalámbrica sin administrar la red. Actualmente ya no se justifica adquirir uno.
Router	Traductor de direcciones IP	Es un access point y un router en el mismo dispositivo. Permite la comunicación con dispositivos Wi Fi o Ethernet

Problemas con la Señal

Al instalar este tipo de tecnología en el LD, es posible que intervengan algunos factores para reducir la performance de la misma:

PROBLEMA	TIPO	SOLUCIÓN
Interferencia	Hornos de Microondas Teléfono Inalámbricos	Ubicar el reuter a distancia de los mismos y evitar utilizarlos por ejemplo en actividades críticas de la red (Facturación, etc).
Paredes	Paredes de Ladrillo Ceresita, etc	Este obstáculo artificial es el principal factor de reducción hay que extremar el ingenio para lograr una buena ubicación del Router.
Ubicación	Lejos de objetos de hierro	Es aconsejable ubicar al Router en el Centro Geográfico del edificio y de ser posible a cierta altura.

LC

LABORATORIO COLOMBO



- **CROMO COBALTO**
- **BARRAS TANGENCIALES**
- **ATTACHMENT**
- **SUPRAESTRUCTURAS P/IMPLANTES**
- **MICROFRESADO**

Tel. 4238-7791

Uruguay 1161 - (1852) Burzaco / Tel. Fax: 4238-0163


cromoscobalto@hotmail.com

DENTURE SYSTEM

Software de Gestión para Laboratorios Dentales

Denture LAB

Cliente
Pacientes
Obras Sociales
Stock
Lista de Precios
Ctrl. y Logística
Ctrl. de Trabajos
Facturación
Cuenta Corriente

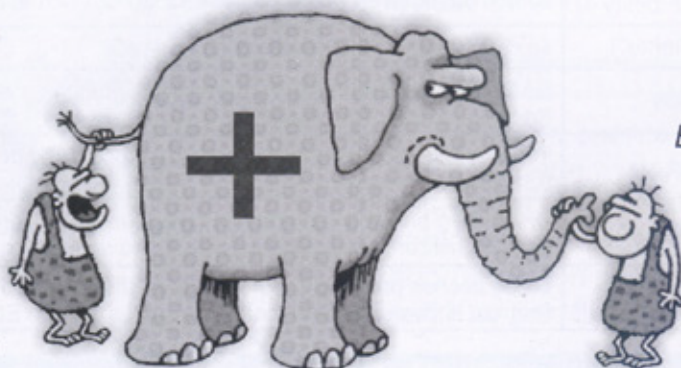

Denture WEB

Enlace en Internet
Acceso Seguro
Lista de Precio
Ofertas
Ctrl. Trabajos
Ctrl. Cta/Cte
Ordenar Retiro
Reportes Varios
Informes Profesionales

Para obtener el Denture-WEB necesita instalar previamente el Denture-LAB

Denture WEB le permite informar a tiempo a su Odontólogo en cualquier lugar del País
Permite mejorar sus tiempos, ahorrar recursos de Logística y satisfacer al Cliente.

Solicite Informes al 4769-2938 ó al 15-5017-0255 - Email: denturewin@hotmail.com

PRESENTAMOS 3 NUEVOS PRODUCTOS

ASPIRADORA
TURBO DENT



\$ 800

NUEVO!

HORNO PARA
PORCELANA



\$ 2800

NUEVO!

TORNO
COLGANTE



\$ 230

NUEVO!

BASE
HUMIDIFICADORA



\$ 250

POLIMER II

LA ORIGINAL



\$ 1.180

ARENADORA
PARA FIJA



\$ 450

PERFORADORA
DE MODELOS

CON LUZ
LASER



\$ 806

INYECTORA DE
PROTESIS FLEXIBLES

INDENT PRESS
12



\$ 4.480

ARENADORA PARA
PORCELANA



\$ 1.100

SOMOS FABRICANTES DE
LINEA OKY DE PRODUCTOS QUIMICOS

Ceras para fija, sin memoria, en láminas, en hilo - Acrílico - Líquido modeladora para porcelana - Líquido electrolítico - Gelatina para cromo y yeso -

EQUIPOS PARA LABORATORIO

Centrifugas - Compresores - Hornos para fija y cromo - Articuladores - Paralelómetros - Prensas - Presuizadores - Pulidora electrolítica - Vibradores -

ACCESORIOS

Mufflas de bronce - Oclusores - Zócalos y matrices en silicona - Discos de corte - Taza de PVC

INDENTAL

EXPOSICION Y VENTAS

M. T. DE ALVEAR 2149 - 1° 'A' | CAPITAL | ARGENTINA
TELEFAX (011) 4823-1178

Solicite la lista de precios a info@indental.com.ar
o visite nuestra web: www.indental.com.ar

ENVIOS A TODO EL PAIS

PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA LABORATORIO DENTAL

CIRCULO DENTAL

**Equipos e Insumos para
odontología
y prótesis dental**

Lun. a Vier. de 9 a 12.30
y de 14 a 18 hs.

E-mail: circulodental@ciudad.com.ar

Casa Central

Avda. del Barco Centenera 1225
Capital Federal (1424)
4925-0463 Tel./Fax: 4922-6037

Sucursal

Belgrano 1143 - Loc.38 - Gal. Trillini
San Miguel (1663)
Tel./Fax: 4664-7311 - Int. 238

CIRCULO DENTAL

**Nueva
Sucursal**

**Av. Rivadavia 13614
(1704) Ramos Mejía
Pcia. de Buenos Aires
Tel: 4654-7960**

Lunes a Viernes
de 9:00 a 12:30 hs.
y de 14:00 a 18:00 hs.

E-mail: circulodental@ciudad.com.ar

DENTAL MILY



Productos odontológicos
y para el protesista en
Lanús Este

**ENVIOS A DOMICILIO
Cel.: 15-5888-5077**

Av. 9 de Julio 1223 - Galería Central
Local 10 - Lanús Este
macande2003@yahoo.com.ar

COMPANY DENTAL

de Nora Casais

**IMPORTADOR DE DIENTES
MARCHÉ Y ACRÍLICOS PARA
CORONAS Y PUENTES**

Horario de Lunes a Viernes
de 8:30 a 18:00 hs.

**CONDARCO 360 - (1834) TEMPERLEY
PCIA. BUENOS AIRES**

Tel./Fax: 011-4245-6560
companydental@ciudad.com.ar



**Productos
Odontológicos y
para Laboratorios**

de Daniel Héctor Vilchez

**TEL.: (011) 4572-0959
CEL.: (011) 15-5105-0828**

**Gral. I. G. de Artigas 3850-PB "I"
(1419) Ciudad Aut. de Buenos Aires**

Prótesis completa

sobre barra Ackerman

Monometalismo en prótesis sobre implantes

Josep M. Fonollosa Pla
Frederic Martorell i Closas

Las prótesis completas inferiores presentan, a menudo, problemas de retención y estabilidad debido a la fatal reabsorción ósea del maxilar inferior normalmente por el uso de prótesis removibles. En el caso que presentamos se pretende mejorar la retención y la estabilidad de la prótesis mandibular mediante implantes. Se trata de confeccionar una sobredentadura implanto-soportada, no mucosoportada, mediante 4 implantes (Fig 1). La principal característica de estas prótesis es que permiten la transmisión de la carga directamente al hueso a través de los implantes. También se ha observado que los implantes mantienen el nivel de la cresta ósea: la cresta desdentada mandibular se reabsorbe cuatro veces más rápidamente sin implantes que con implantes. En concreto, las crestas edéntulas sin implantes se reabsorben 0,4 mm por año y con implantes 0,1 mm por año a partir del segundo año.

Una vez montados los modelos en el articulador mediante el registro de relación céntrica se preparará la plantilla de montaje con el espacio virtual para elaboración de la barra y se comprobará el espacio con los modelos montados en el articulador (Fig. 2).

El montaje de una prótesis completa sobre implantes debe atender a criterios estéticos y, sobre todo, funcionales. El principal objetivo será evitar o disminuir la sobrecarga de los implantes. En efecto, los principales factores biomecánicos que influyen de manera determinante en la sobrecarga de los implantes son, entre otros, los siguientes: el tipo de hueso, la inclinación de las cúspides, el desplazamiento lateral en el plano horizontal, la correlación entre la arcada superior y la inferior, la inclusión de dientes naturales en la prótesis y la anatomía oclusal. Resulta muy difícil controlar de manera exhaustiva cada uno de estos factores, pero

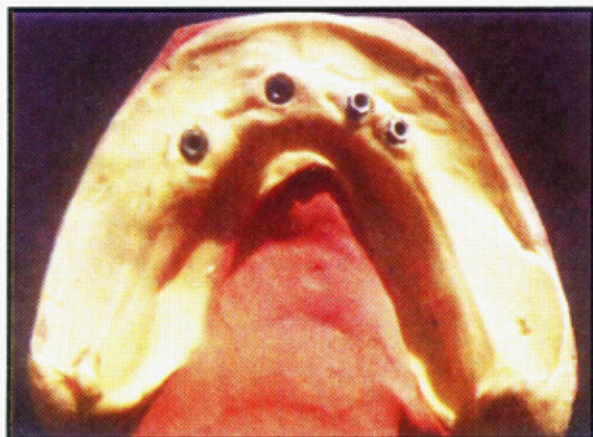


Fig.1- Presentación del modelo.



Fig.2- Plantilla con el espacio virtual en el articulador.

Productos Argentinos

Garantía de calidad, Precio y Reposición PASE LO QUE PASE

1er. ATTACHEMENT ESFERICO ARGENTINO

Con porta cofias en acero inoxidable y su línea de barras y pernos calcinables, cofias elásticas y accesorios.

Porta cofias esféricas NIC en acero inoxidable.

• Económico • Especialmente diseñado para incluir en prótesis completas o removibles de acrílico o cromo cobalto, donde no se quieran colar estos dispositivos, o que permanezcan en resina • Precisión extrema en el habitáculo, cualidad que permite que las cofias trabajen con la elasticidad correspondiente. • Material puro, inalterable a través de los años. • Fácil recambio de las cofias, evitando el rebasado.



Barras Micro
Recta o Angulada.
Esferas Ø 1.8 mm.



Perno Micro
Esferas Ø 1.8 mm.
Largo: 8y12 mm.



NUEVO



Porta Cofias
Perforadas en
acero inoxidable
Macro o Micro



Cofias Elásticas Axiales
Verdes Ø 1.8 mm.

Cofias Elásticas Micro
Amarillas Ø 1.8 mm.

Cofias elásticas
Macro. Rojas. Ø 2,5 mm.




Barras Macro
Rectas o Angulada,
Esferas de Ø 2,5 mm.



Pernos Macro
Esferas Ø 2,5 mm.
Largo: 9, 11 y 14 mm.

Accesorios

- Inserto I Paralelizador Macro
- Inserto I Paralelizador Micro
- Biposicionador de Cofias
- Regulador de Fricción

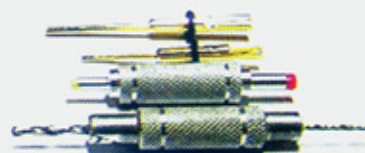

ATTACHEMENTS MODELO P.V.

BARRA TANGENCIAL MODELO PH

SOLUCION PARA PULIDO ELECTROLITICO

BEBEDEROS



Elemento para retención de dentaduras removibles combinadas con prótesis fijas.
Patriz calcinable
Matriz de teflón.



Elemento de retención y ferulización entre prótesis fijas y removibles metálicas o acrílicas.
Barras calcinables.
Matrices de teflón.



Fórmula equilibrada,
enriquecida x 1000 cc.



Para técnica de inyección directa.
Material de excelente pureza. Una medida para cada necesidad.
Funde como una buena cera.

Benefíciense con el



Distribuidora NIC
IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN

NICSOL



Aislante entre el yeso y cerámica dental. Impermeabiliza el sector de contacto yeso-cerámica sin formar espesores, permitiendo una perfecta adaptación.

LUBRINIC



Aislante para encerados. Aplicable sobre yeso, metales, lacas, epoxis, cerámicas y plásticos.

ELIBUR



Reductor de tensiones. Elimina burbujas en revestimientos y yesos. x 60 cm³ x 60 cm³ de vaporizador x 180 cm³ en aerosol

LACANIC



Para prótesis fija. Creador de espacios sobre muñones, estinado al cemento odontológico. Utilizar sobre modelo seco. Agitar antes de usar.

www.viacreativa.com.ar

PLANTILLA METALICA "IMPERIO"



Para cocción de cerámica dental. Nivel internacional.

PLATAFORMA CERAMICA



Para cocción de porcelana. Diámetro Ø 65 mm.

MANTA CERAMICA



Elemento para cocción de cerámica. Única con material para soporte. Muy económica.

SISTEMA COUPLE



Conector para modelos de trabajo. Bucks de bronce eternos. Femias elásticas recuperables.

"Compre Nacional"

www.distribuidoranic.com.ar

jlorodriguez@distribuidoranic.com.ar

durante el montaje de los dientes podemos contribuir a disminuir la tan nociva sobrecarga de los implantes atendiendo a los siguientes parámetros:

En primer lugar se ha de alcanzar una oclusión en la que coincida máxima intercuspidad dentaria con la posición condilar de relación céntrica. Lo que Okeson ha denominado oclusión funcional óptima que, con relación a los cóndilos están en una posición fisiológica, en la que se encuentran centrados en la fosa, en su situación más superior y correctamente relacionados con sus meniscos contra la vertiente posterior de la eminencia articular. En cuanto a los dientes se entiende que la relación entre dientes superiores e inferiores

durante el cierre mandibular, menos traumática para los implantes, será aquella que produce un contacto simultáneo y uniforme de todos los dientes posibles. Este tipo de relación oclusal proporciona la máxima estabilidad de la mandíbula, al tiempo que reduce al mínimo la cantidad de fuerza aplicada durante la función.

Por ello es imprescindible eliminar cualquier prematuridad, es decir, cualquier contacto dentario durante el movimiento de cierre mandibular, con los cóndilos en relación céntrica, que se produce antes de que se consiga alcanzar la máxima intercuspidad. Estas prematuridades, provocan que los cóndilos se desplacen de la posición de relación céntrica con las consiguientes sobrecargas articulares y musculares,

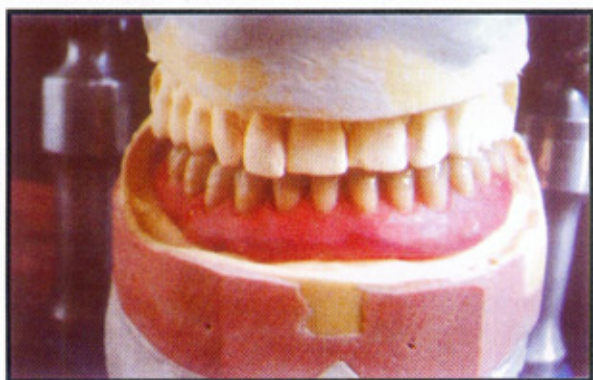


Fig.3- Montaje desde el plano frontal.

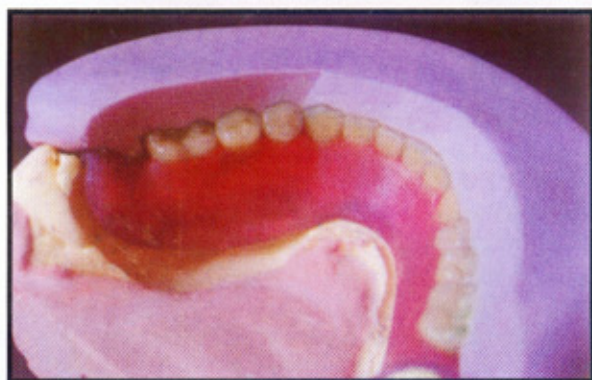


Fig.4- Llave de silicona.



Fig.5- Chequeo del espacio para la confección de la barra.



Fig.6- Montaje y preparación del caballete en cera.



Fig.7- Barra preparada y ajustada.

factores que, interrelacionadamente, determinan la dirección la magnitud de la fuerza distribuida al hueso de soporte: la anatomía de las superficies de oclusión determina la dirección del vector de fuerza resultante, mientras que la localización de dicho vector de fuerza, en relación con el implante y el hueso de soporte, determinan el carácter de la carga aplicada. Sintetizando: cuando una cúspide ocluye contra una fosa plana, la fuerza resultante tiene una dirección vertical y coincide con el hueso de soporte o está próxima al mismo. Sin embargo, cuando una cúspide impacta sobre una pendiente, la fuerza resultante tiene una dirección oblicua alejándose del hueso de soporte. De este modo se produce un componente de fuerza lateral que es

más nocivo para el hueso de soporte que la carga vertical. De la misma manera, cuando se coloquen los dientes no se deberá abusar de las curvas de compensación (Curva de Spee y de Wilson) pues, igualmente, se estarán favoreciendo contactos oblicuos. En este trabajo se han usado dientes Vivodent de la firma Ivoclar de formas N pues atienden a estos principios y, además, ofrecen unos excelentes resultados estéticos.

Una vez montados los dientes se realiza una llave de silicona para controlar su posición y poder chequear el espacio para confeccionar la barra (Fig. 4 y 5).

La elaboración de la barra se ha construido según

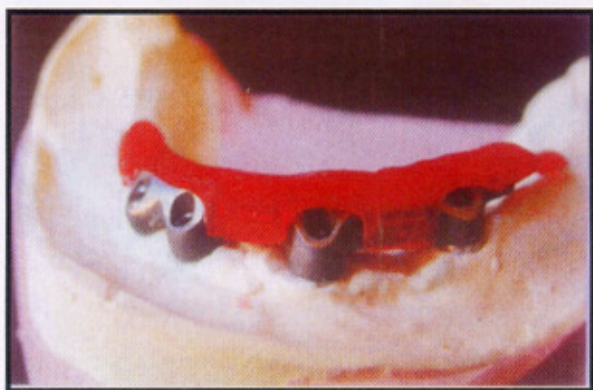


Fig.13- Estructura secundaria preparada para colar.

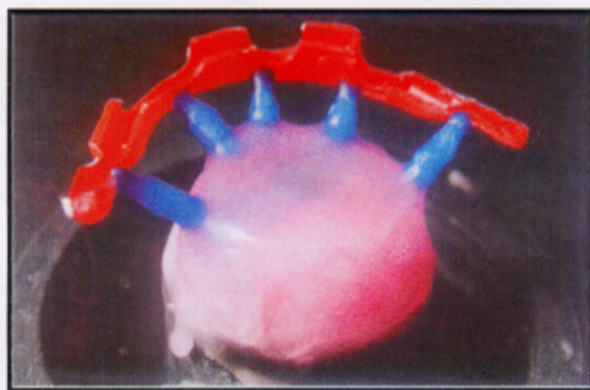


Fig.14- Colocación en cilindro para colar en titanio.

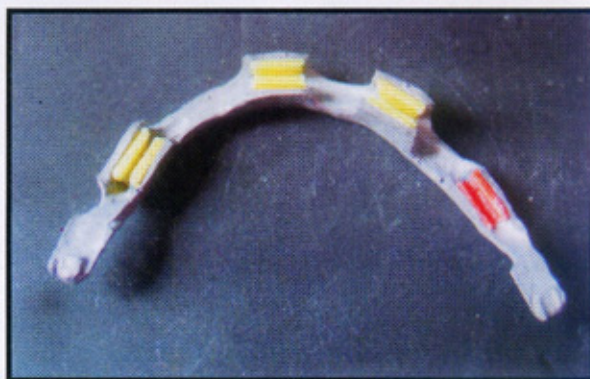


Fig.15- Colocación de las grapas en la estructura.

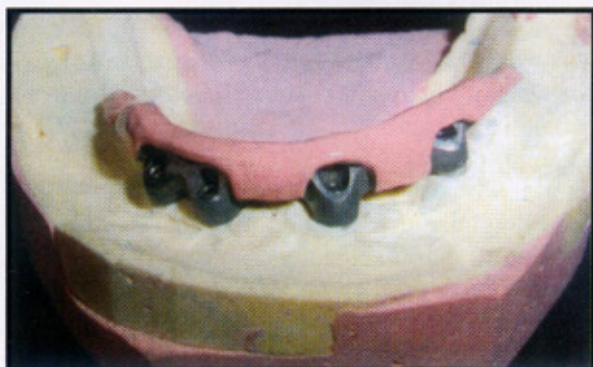


Fig.16- Estructura secundaria con opáquer rosa

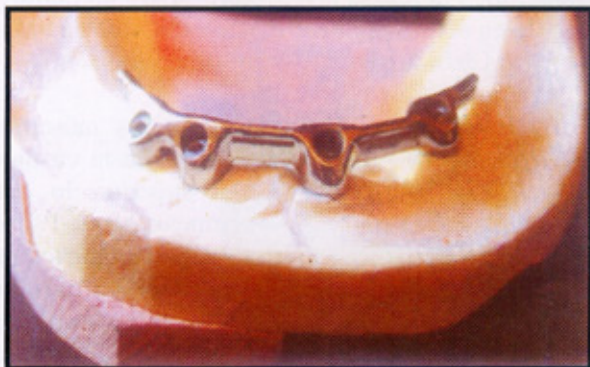


Fig.17- Barra pulida

NUEVO CONCEPTO EN
EQUIPAMIENTOS PARA
LABORATORIOS

DICSA
TECHNOLOGY



CALENTADOR DE CERA
PARA COFIAS POR INMERSIÓN
HC-1



AMPLIO BORDE
DE REFLUJO



SELECCION DIGITAL
DE TEMPERATURA REAL



COFIAS PERFECTAS CON
ESPEORES UNIFORMES
EN TODA LA SUPERFICIE

INFORMES

GERARDO CASAL TEL.154-534-0349
DICSATECHNOLOGY@ciudad.com.ar

PABLO PACHKO

**MATERIALES
Y EQUIPAMIENTO
PARA
PROTESICOS DENTALES**

*Asesoramiento
Técnico*

*Atención
Personalizada*

TEL.: 4544-6534
CEL.: 15-4170-0487

Horno Mufla

PARA LABORATORIO

Ideal para todo tipo de análisis
químico e industrial



- PARA PROTESIS FIJA
- PARA CROMO COBALTO
- SEMI AUTOMATICO
- COMPUTARIZADO

O.R.L.
HORNOS ELECTRICOS

Santa Elena 463 "A"
C1278ACC - Capital Federal
Tel./Fax (011) 4302-4619
E-mail: ventas@orlhornos.com.ar
Web: www.orlhornos.com.ar

Solicite información por el N° 4219

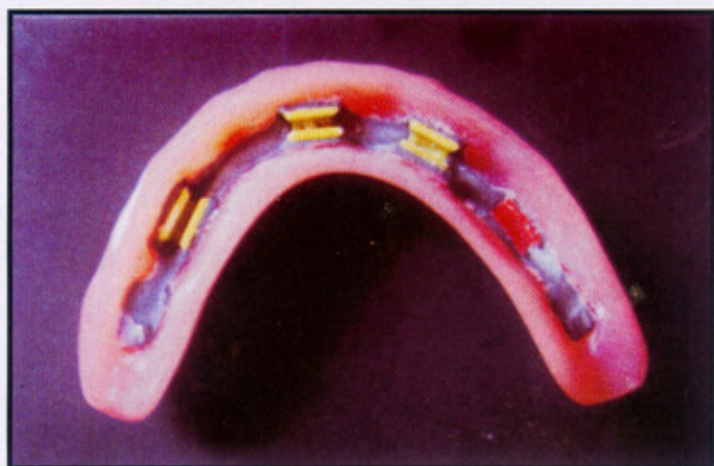


Fig.18- Completa acabada



Fig.19- Completa acabada



Fig.20- Completa acabada

las siguientes condiciones. (Fig. 6, 7):

- Se ha diseñado de manera que quede paralela al eje de rotación mandibular para que, al ocluir los dientes pueda rotar la sobredentura alrededor de la barra.
- Se ha situado sobre la cresta
- Se ha dejado una separación entre la barra y la encía de 2 mm para permitir la higiene del paciente.
- Se ha colocado dos tramos en extensión de 6 mm Para mejorar la estabilidad y la retención de la prótesis.
- Se ha optado por un barra redonda (Ackerman) ya que permite la rotación de la prótesis alrededor de la barra siempre y cuando se sitúe paralela al eje de rotación mandibular.

Una vez preparada la barra se chequean los espacios con la silicona del montaje de dientes. A continuación se colocan las grapas (Fig. 8, 9). Se prepara la estructura secundaria (Fig. 10), se chequean los espacios (Fig. 11), se realiza en acrílico la estructura secundaria y se elimina la cera (Fig. 12). Se prepara la estructura secundaria para colar en titanio y se coloca en cilindro (Fig. 13 y 14). Una vez colada la estructura secundaria se colocan las grapas en la estructura secundaria y se posiciona en la barra (Fig. 15).

A continuación se pinta con opáquer rosa para evitar que el color del metal pueda transparentar y se pule la barra (Fig. 16 y 17).

Finalmente se acaba la prótesis y se pule (Fig. 19 y 20). □

La línea de productos dentales mas utilizada en los laboratorios.

Cromovest

Revestimiento para metales de alta fusión

Genau

Gelatina duplicadora de modelos (Formula Italiana)

Pulicrom

Solución electrolítica para el abrillantado de metales

Sigma

Revestimiento al agua, para Cr-Co, Fija y Cerámica

Low-vest

Revestimiento para metales de baja fusión

Acry Film

Separador de acrilicos y yesos

Bañomol

Endurecedor de modelos

Triwax

Ceras preformadas y ceras para modelar

Tel.Fax: 4758-9567 - Haedo - Bs. As. - Argentina



www.sigmadent.com.ar / info@sigmadent.com.ar

HORNOS ESTIGIA®

Tenemos mas
de 25 años
de experiencia
Consultenos !!!



HORNO ELECTRICO
PARA FIJAS Y CROMO

- ❖ Reparación
- ❖ Excelente Precios
- ❖ Somos fabricantes
- ❖ Stock permanente de repuestos
- ❖ Repuestos de muflas para porcelana dental

Calle 1 N° 275 - (B1902CGF) La Plata
Tel./Fax: (0221) 421-7276
Lun. a Sab. de 08:00 a 13:00 hs.

Email:


hornosestigia@yahoo.com.ar
www.hornosestigia.com.ar

Visite nuestra
Pagina web



Prótesis Flexibles OSPAFLEX

Estéticas
Transparentes
Translúcidas
Livianas
Flexibles

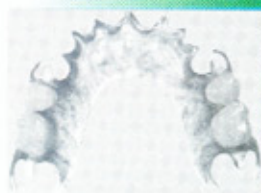

- ◆ Coloración y Transparencia a gusto
- ◆ Certificados de atoxicidad

INYECTADAS PARA LABORATORIOS

Venta de Material e Inyectoras
CONSULTAR PRECIO

Informes y ventas

011-4230-4447

Email: laboratorio_ospasan@hotmail.com

Laboratorio Dental

ANTONIO RAO

*Cromos y Atachmen para
odontólogos y Colegas Protésicos*

Alte. Brown 5273 - Ezpeleta
Pcia. Buenos Aires
antoniorao@infovia.com.ar

TEL.: 4256-3342

DENTAL CLASSIC

- Materiales para el Protesista Dental
- Descuento por pago contado
- Entregas sin cargo
- Servicio Técnico de reparación

Envíos a Domicilio

Belgrano 1441
(1828) Banfield - Pcia. Bs. As.
Tel.: 4248-8524

ROMAN

Muflas - Bridas
Prensas - Mecheros

drteklecki@yahoo.com.ar

Industria Argentina al servicio
del Protesista dental



ARGENTINA

CERAS PREFORMADAS

Y

ART. para PROTESIS DENTAL

drteklecki@yahoo.com.ar



**35 años
y la satisfacción
de los objetivos
cumplidos**

¡SIEMPRE ANHELAMOS ESTA REALIDAD!

Gracias a nuestros clientes que han confiado en la atención y profesionalismo de los servicios que le brindamos día a día. Ahora, CROMO COBALTO en 24 horas con entrega a domicilio.

PROTESIS COMBINADAS con todo tipo de attachments, nacionales e importados.

Además de Levantamiento de mordidas, rompiefuerzas, bisagras, etc

La satisfacción
de ustedes
es la nuestra

REALIZAMOS
TRABAJOS
PARA COLEGAS
DE TODO EL PAIS

Gurruchaga 571 Tel./Fax: 4854-3466
(1414) Capital Cel.: 15-4447-7608
email: robertochiappa@yahoo.com.ar

DENTAL GIACCHI

**Venta de Productos
Odontológicos y
para Laboratorio**

29 de Setiembre 1746 - Lanús Este
email: dentalgiacchi@hotmail.com

TEL./FAX: 4249-8416

Estudio Contable

de Gerardo Gómez
CONTADOR PUBLICO

Carlos Pellegrini 612 - Burzaco

Tel.: 4238-3015

gegomez@voyager.com.ar

LABORATORIO NOGUEIRA


Itapirú 3326 - V. Alsina - Tel.: 4209-1693

e-mail: horacio@hnlab.com.ar

web: www.hnlab.com.ar

PROTESIS INYECTADAS FLEXIBLES

TRABAJOS PARA COLEGAS

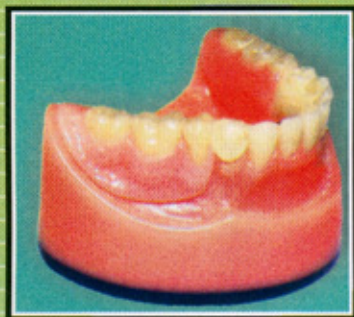


- Prótesis Parciales
- Reparaciones
- Prótesis Completa
- Rebasados
- Retenedores transparentes



- Prótesis Unilaterales o Acetálicas

- Pernos Muñones en Acetálico para Implantes

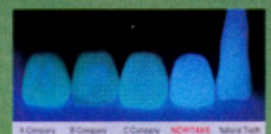

Noritake
Super Porcelain EX-3

Porcelana sintética para uso convencional sobre metal y, cambiando el revestimiento, para uso en coronas anteriores libres de metal, carillas e incrustaciones.

Consúltenos y/o adquiéralos en cualquiera de nuestros distribuidores nacionales.



Dental Medrano S.A. | Paraguay 3026 (C1425BRL) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: (011) 4962-9000 | Fax: (011) 4962-1212 | email: info@dental-medrano.com.ar



servicio al consumidor
(++5411) 4963-2088
consulte nuestras ofertas

Programat® P200

ivoclar
vivadent

Cerámica de alta calidad exige un alto valor tecnológico.



Su restauración de cerámica, nuestro horno. La combinación ideal.

El horno de cerámica Programat P200 continúa la historia de éxitos de los hornos Programat de Ivoclar Vivadent. Programat P200 se destaca especialmente por su sencillo concepto de manejo y la exactitud de las cocciones. Con el Programat P200 es posible cocer todas las cerámicas de Ivoclar Vivadent y el resto de las cerámicas.

P200

AMPLIAS Y ACCESIBLES FORMAS DE PAGO.



Marcelo T. de Alvear 2129/31
C.P: C1122AG - Bs.As. Argentina
Tel: (54-11) 4821-9380
Fax: (54-11) 4821-8307
e-mail: info@novacekdental.com.ar

Marcelo T. de Alvear 2177
C.P: C1122AG - Bs.As. Argentina
Tel: (54-11) 4825-7688
Fax: (54-11) 4821-9380
e-mail: facultad@novacekdental.com.ar

Av.Chacabuco 127
C.P: X5000YYB Córdoba Argentina
Tel: (54-351) 4265661
Fax: (54-351)4265647
e-mail: cordoba@novacekdental.com.ar

form-Ar
line

attachments

Industria nacional

La mejor solución sobre
Coronas, Pernos y Puentes.





**NUNCA MAS FRACASOS
SOBRE IMPLANTES !!!**

El sistema pensado para
evitar cargas inconvenientes.

attachments

Buenos Aires - Argentina

Consultas Técnicas
y/o Comerciales

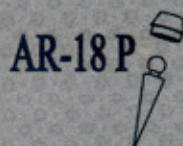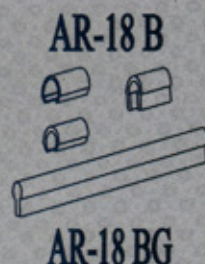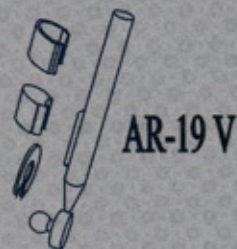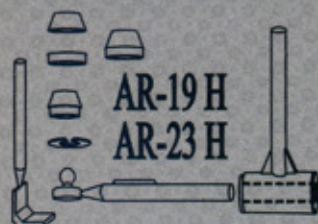

(011) 4628-1005

(011) 15-5423-8886

form_ar@ciudad.com.ar

form-ar@drillco.com.ar

ADHESIONES

<p style="text-align: center;">LABORATORIO NOGUEIRA Itapirú 3326 - Lanús Oeste TEL.: 4209-1693</p>	<p style="text-align: center;">Laboratorio OLABERRY San Carlos 308 - Wilde TEL.: 4217-5055</p>
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">RS</p> <p style="text-align: center;">Laboratorio Dental ROJO - SANJUAN Anatole France 754 - Lanús Este TEL / FAX: 4247-8888</p>	<p style="text-align: center;">Laboratorio BELLA Matheu 227 - Quilmes TEL.: 4257-5210</p>
<p style="text-align: center;">Carlos Antonio Quinteros PROTESICO DENTAL H. Primo 1070 - Burzaco TEL.: 4299-0403 quinteroslab@hotmail.com</p>	<p style="text-align: center;">LABORATORIO RODRIGUEZ Fco. Amero 438 - Lomas de Zamora TEL.: 4245-2941</p>
<p style="text-align: center;">Laboratorio MARCOTE-RODRIGUEZ Llavallol 32 1ªA - Lanús Oeste TEL.: 4262-3915</p>	<p style="text-align: center;">Laboratorio Dental PABLO FERRARA Bueras 1280 - Lanús Este TEL.: 4247-5279</p>
<p style="text-align: center;">OSCAR SANCHEZ 29 de Setiembre 2478 Dpto 1 - Lanús TEL.: 4225-2776</p>	<p style="text-align: center;">Laboratorio Banfiel Dental Abel N. Casal Gerardo S.Casal BOULOGNE SUR MER 1541 (ex Serrano) Banfield Tel/Fax: 4242-7362 E-mail: banfiel_dental@ciudad.com.ar</p>
<p style="text-align: center;">Carlos Napolitano Laboratorio de Protesis Dental Mentruyt 1945 (B1828CXU)- Banfield Tel.: 4248-2994 / 4248-9666 E-mail: dental_can84@hotmail.com</p>	<p style="text-align: center;"><i>Ezequiel Taranco</i> TODAS LAS ESPECIALIDADES Tel.: 4238-0163/7791</p>
<p style="text-align: center;">LABORATORIO COCO Yerbal 3670 - Lanús Oeste <i>Porcelana / Implantes</i> Tel.: 4262-4232</p>	<p style="text-align: center;">Odontología Integral Buenos Aires Av. Rivadavia 5921 - 1º C Tel.: 4433-5818</p>



BOLSA DE TRABAJO

APELLIDO	NOMBRE	TELEFONO	DIRECCION	LOCALIDAD	C.P.
Galker	Ileana Noel	4279-0448	Essoin 509	Burzaco	1854
Gentilcore	Silvina Beatriz	4286-5927	Constitución 1948	Banfield	1828
Sujemezki	Elizabet	4241-8895	Florencio Varela 656	Lanús Oeste	1824
Planel	Ariel Hernán	4288-0375	Timote 4046	R. de Escalada	1826
Magnino	Patricio J.	4247-4586 15-5755-5792	Carlos Tejedor 950	Lanús Oeste	1824
Leonti	Gabriela Analia	4225-8610	Gral. Ferré 948 Dto.1	Lanús	1824
Martinez	Romina	15-5491-2752	Estudiante del Instituto IFIN		
Alvarez	Lorena	4220-5296			
Laforza	César Ariel	4246-2724 15-5497-2560			
	Graciela	4241-3087			

Piedras abrasivas para Cobalto - Cromo y aleaciones duras



PIEDRAS MARRONES

Dureza media para desbaste suave y fina terminación

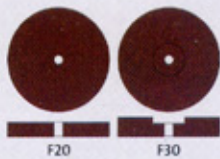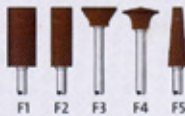

PIEDRAS ROSAS


Alta dureza para desbaste rápido, agresivo y profundo

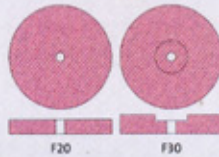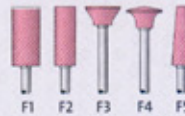

Piedras abrasivas para Acrílicos

PIEDRAS BLANCAS

Grano grueso: para desbaste profundo.
Grano fino: para acabado.

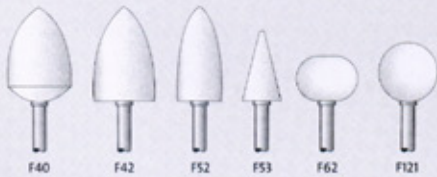

PIEDRAS RUBI


Grano grueso: para desbaste profundo.
Grano fino: para acabado.
Excepcional rendimiento y larga vida útil.



Piedras abrasivas para Metales y Cerámicas


PIEDRAS VERDES

Para materiales cerámicos y aleaciones preciosas

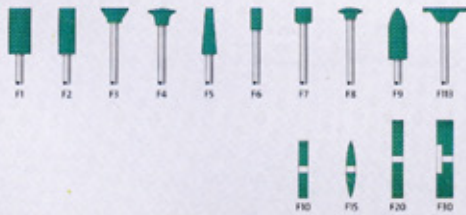

PIEDRAS BLANCAS


Para estructuras de prótesis fijas y ceramo-metálicas

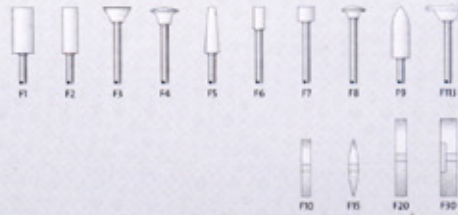

Discos abrasivos

HIGH SPEED y CUT OFF

Para corte y desbaste de cobalto-cromo y otras aleaciones

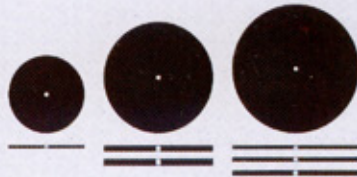

CARBODENT

1 y 2 caras - Carburo de Silicio
Discos para separar y desbastar materiales cerámicos y aleaciones preciosas



EXTRA THIN

Carburo de Silicio: para cerámica y aleaciones preciosas
Oxido de Aluminio: para aleaciones no preciosas



macrodent

**EXPODENT
CORDOBA 2005
STAND 22 Y 24**

ACRITONE

Calidad que respalda su prestigio

DIENTES ACRÍLICOS



**Cross-linked
Fluorescentes**



¡NUEVO!

**ACRÍLICOS PARA DENTADURAS V-12
EN ROSA, ROSA VETEADO Y CRISTAL**



Termocurables



Autocurables



Termocurables



Autocurables

**ACRÍLICOS para
CORONAS y PUENTES**

O'DENT S.R.L.
Tecnología Dental

Av. Márquez 2969- (1655) J. L. Suárez - Bs. As. - Argentina
Tel./Fax: (011) 4720-0770 / 4006-4818
www.odent.com.ar